


Описание основных материалов и их характеристик. Сферы применения материалов в изготовлении лабораторной мебели ММЛ.

Материал
Пластик с рабочим слоем

Описание
LabGrade


Применение

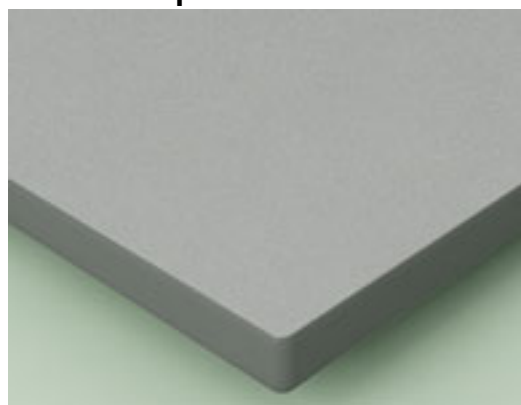

Пластик представляет собой влагостойкую ДСП (толщиной 16мм), покрытую лабораторным п

- Лабораторные столы
- Физические столы
- Химические столы
- Столы для приборов
- Столы подкатные
- Титровальные установки
- Столы для весов комбинированные
- Столы-мойки


Монолитный Пластик
Trespa TopLab

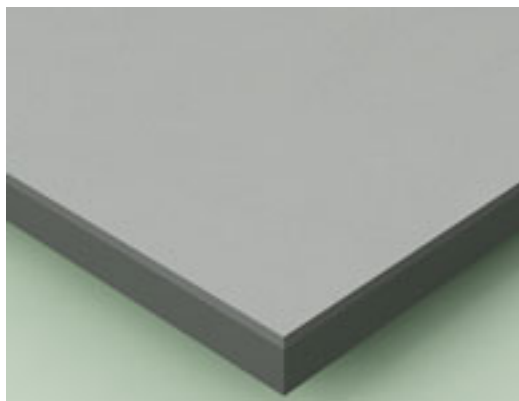

Монолитный пластик (термически закаленные синтетические смолы, гомогенно укрепленные цементом). Высокая износостойкость, кислото- и термостойкость. Неигроскопичен.

- Лабораторные столы
- Физические столы
- Химические столы
- Столы для приборов
- Вытяжные шкафы
- Титровальные установки
- Столы для весов комбинированные
- Столы-мойки

Монолитный Пластик **СЛОПЛАСТ**

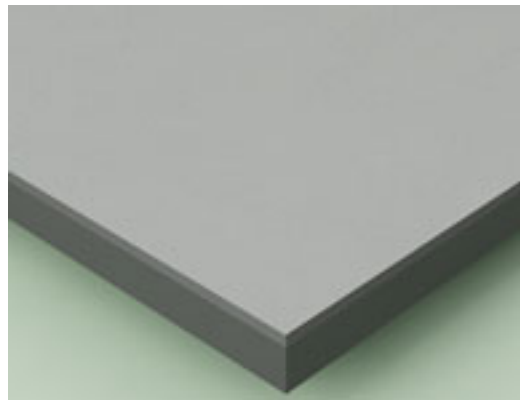


Отечественный аналог монолитного пластика Треспа. Производится из отечественного сырья. Высокая износостойкость, кислото- и термостойкость. Неигроскопичен.

- Лабораторные столы
- Физические столы
- Химические столы
- Столы для приборов
- Вытяжные шкафы
- Титровальные установки
- Столы для весов комбинированные
- Столы-мойки

Керамическая плитка

Керамогранит

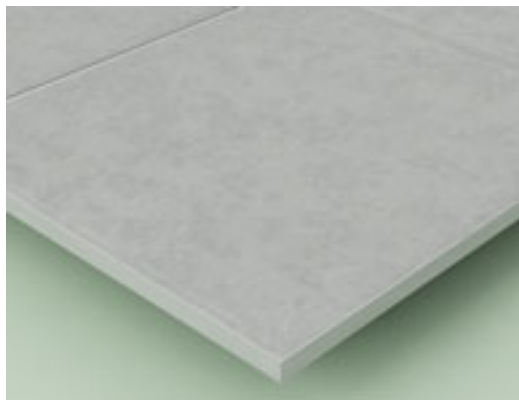


Плитка из керамогранита, уложенного на подложку из ДСП (толщиной 16 мм) и обрамлённого

- Лабораторные столы
- Физические столы

- Химические столы
- Столы для приборов
- Вытяжные шкафы
- Титровальные установки

Композит **DURCON**

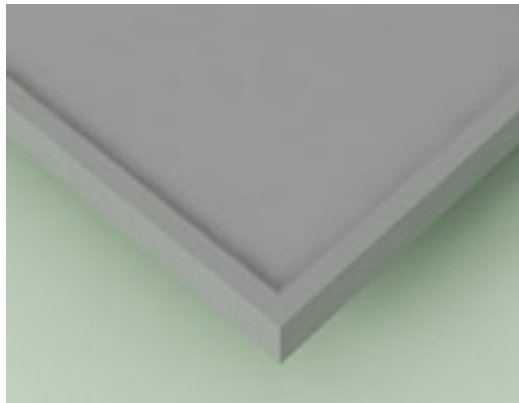

Композит на основе эпоксидных смол, пожаробезопасный материал, стойкий к большинству аг
Цвета : белый, серый, черный.

Возможна установка обрамляющих бортиков из DURCON.

- Лабораторные столы
- Физические столы
- Химические столы
- Столы для приборов
- Вытяжные шкафы
- Титровальные установки
- Столы для весов комбинированные
- Столы-мойки

-

Натуральный камень **Мрамор**



Полированные мраморные плиты. Используются для рабочих поверхностей столов для весов в

- Столы для

- Столы для весов комбинированные

Натуральный камень

Гранит



Полированные гранитные плиты. Используются для рабочих поверхностей столов для весов в с

- Столы для
- Столы для весов комбинированные