


Производство лабораторной мебели [NordStyle](#) осуществляется в собственном производственном комплексе Компании, оснащенным современным оборудованием и станками. Производственный комплекс организован по принципу полного цикла. Модульная система производится по оригинальной технологии и является собственностью Компании. В производстве лабораторной мебели используется металл, как наиболее подходящий материал для мебели в лаборатории. Металл покрывается в электростатическом поле специальной порошковой краской на основе эпоксидных полиэфирных смол, отверждаемой при высокой температуре.

Пластик с рабочим слоем

LabGrade

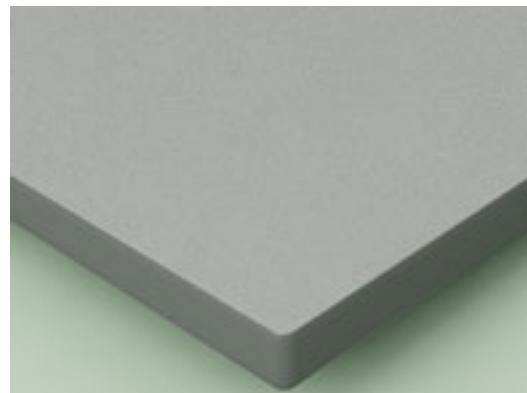


Пластик представляет собой влагостойкую ДСП (толщиной 16мм), покрытую лабораторным п

- Лабораторные столы
- Физические столы
- Химические столы
- Столы для приборов
- Столы подкатные
- Титровальные установки
- Столы для весов комбинированные
- Столы-мойки

Монолитный Пластик

Trespa TopLab

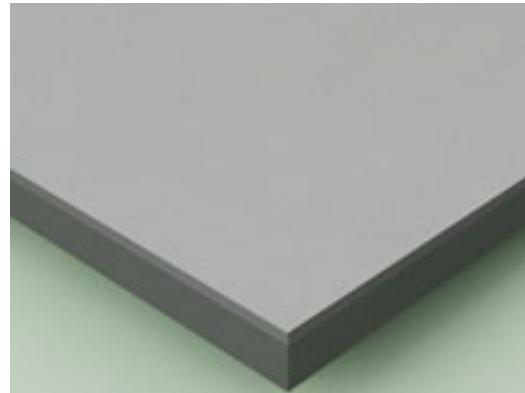


Монолитный пластик (термически закаленные синтетические смолы, гомогенно укрепленные це

Высокая изностойкость, кислото- и термостойкость. Негигроскопичен.

- Лабораторные столы
- Физические столы
- Химические столы
- Столы для приборов
- Вытяжные шкафы
- Титровальные установки
- Столы для весов комбинированные
- Столы-мойки

Монолитный Пластик **СЛОПЛАСТ**

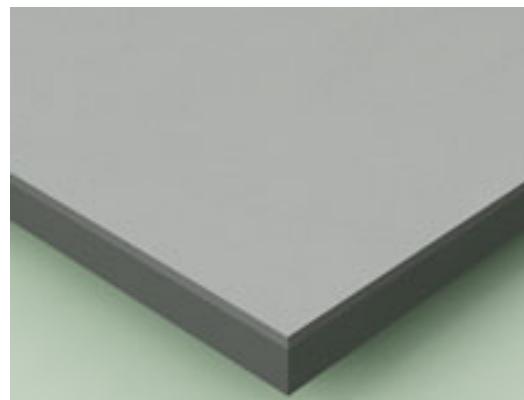


Отечественный аналог монолитного пластика Треспа. Производится из отечественного сырья

Высокая изностойкость, кислото- и термостойкость. Негигроскопичен.

- Лабораторные столы
- Физические столы
- Химические столы
- Столы для приборов
- Вытяжные шкафы
- Титровальные установки
- Столы для весов комбинированные
- Столы-мойки

Керамическая плитка
Керамогранит

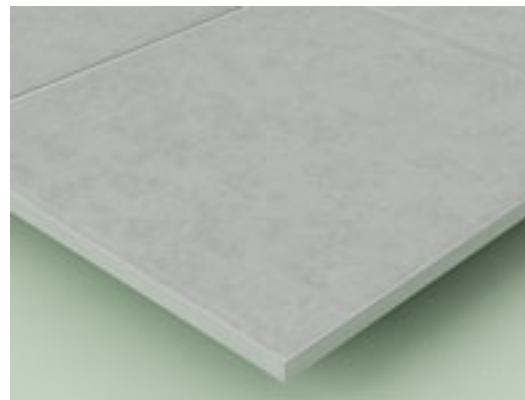


Плитка из керамогранита, уложенного на подложку из ДСП (толщиной 16 мм) и обрамлённого

- Лабораторные столы

- Физические столы
- Химические столы
- Столы для приборов
- Вытяжные шкафы
- Титровальные установки

Композит
DURCON

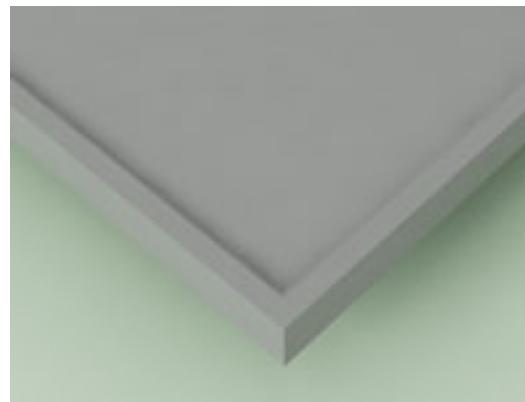

Композит на основе эпоксидных смол, пожаробезопасный материал, стойкий к большинству агрессивных веществ.

Цвета : белый, серый, черный.

Возможна установка обрамляющих бортиков из DURCON.

- Лабораторные столы
- Физические столы
- Химические столы
- Столы для приборов
- Вытяжные шкафы
- Титровальные установки
- Столы для весов комбинированные
- Столы-мойки

-

Натуральный камень
Мрамор



Полированные мраморные плиты. Используются для рабочих поверхностей столов для весов в

- Столы для
- Столы для весов комбинированные

Натуральный камень

Гранит



Полированные гранитные плиты. Используются для рабочих поверхностей столов для весов в с

- Столы для
- Столы для весов комбинированные